



La Pressodermie®


eureduc

Douceur & efficacité




Les systèmes de PRESSOTHÉRAPIE classiques : une efficacité contestée

PRESSON UNIQUE GLOBALE

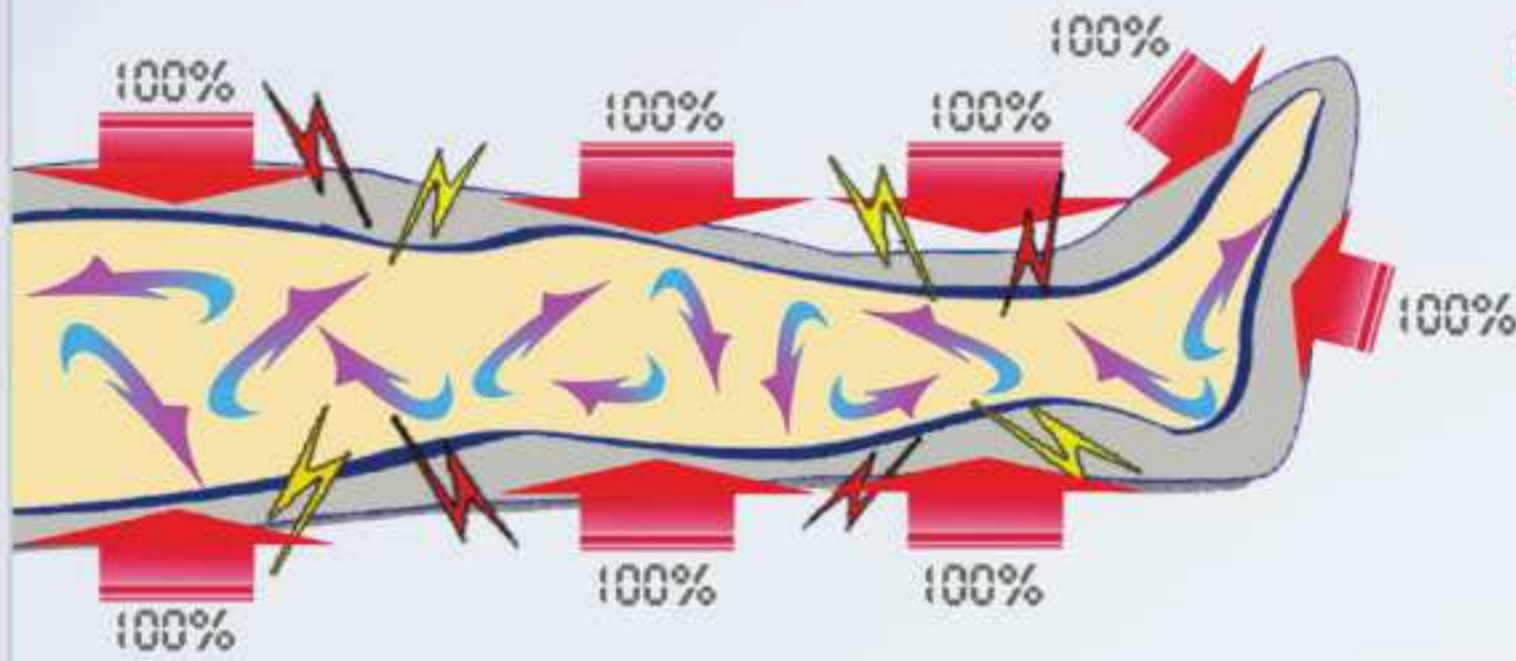

Presson unique globale
= Effets anarchiques préjudiciables au flux veinolymphatique

SIMPLE GRADIENT DE PRESSON

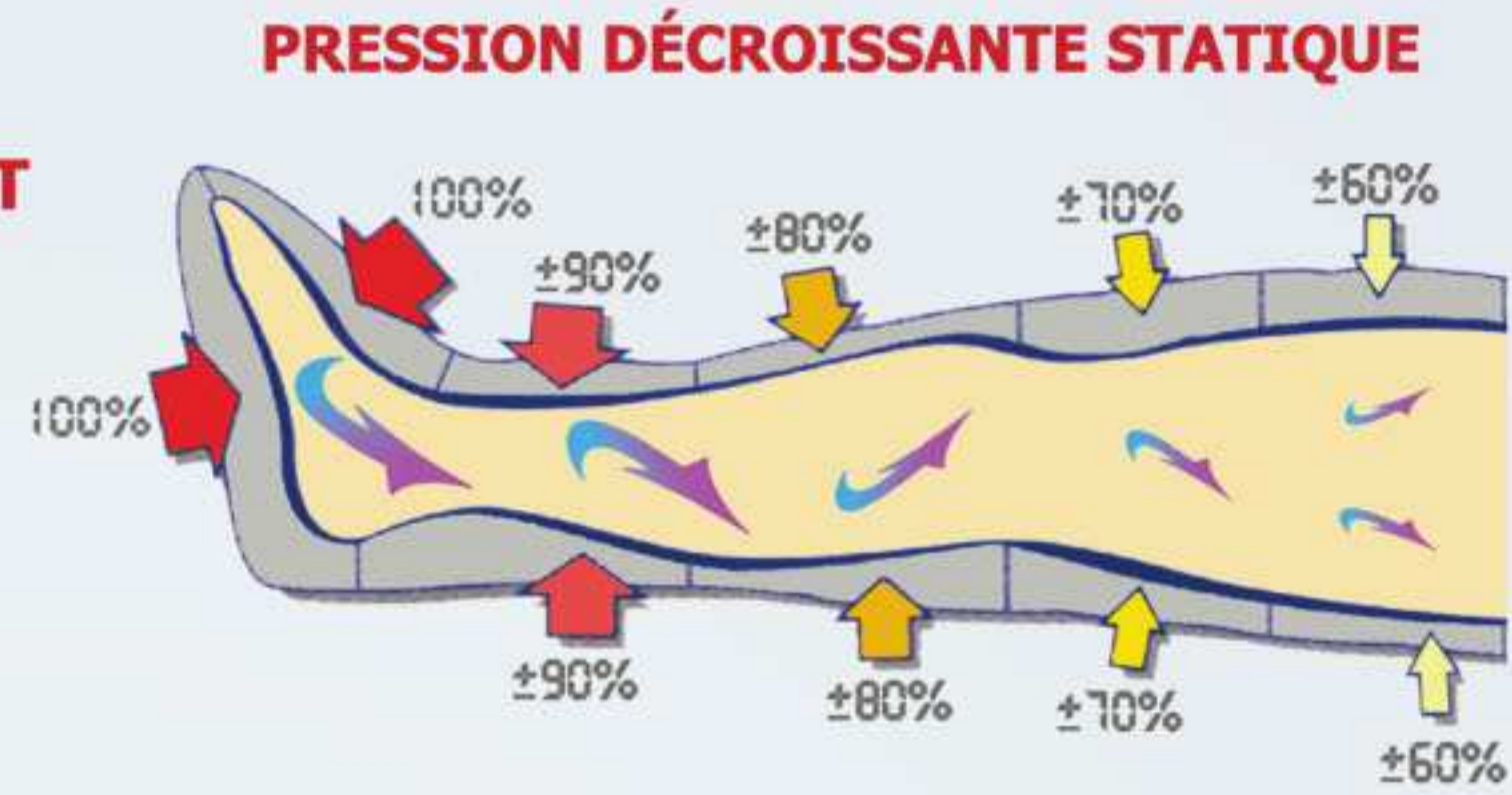


Presson décroissante statique
= Effets réduits sur le flux veinolymphatique général




La Pressodermie® : l'authentique pressothérapie étagée


LE DOUBLE GRADIENT DE PRESSON AUTOMATIQUE (DGPA)

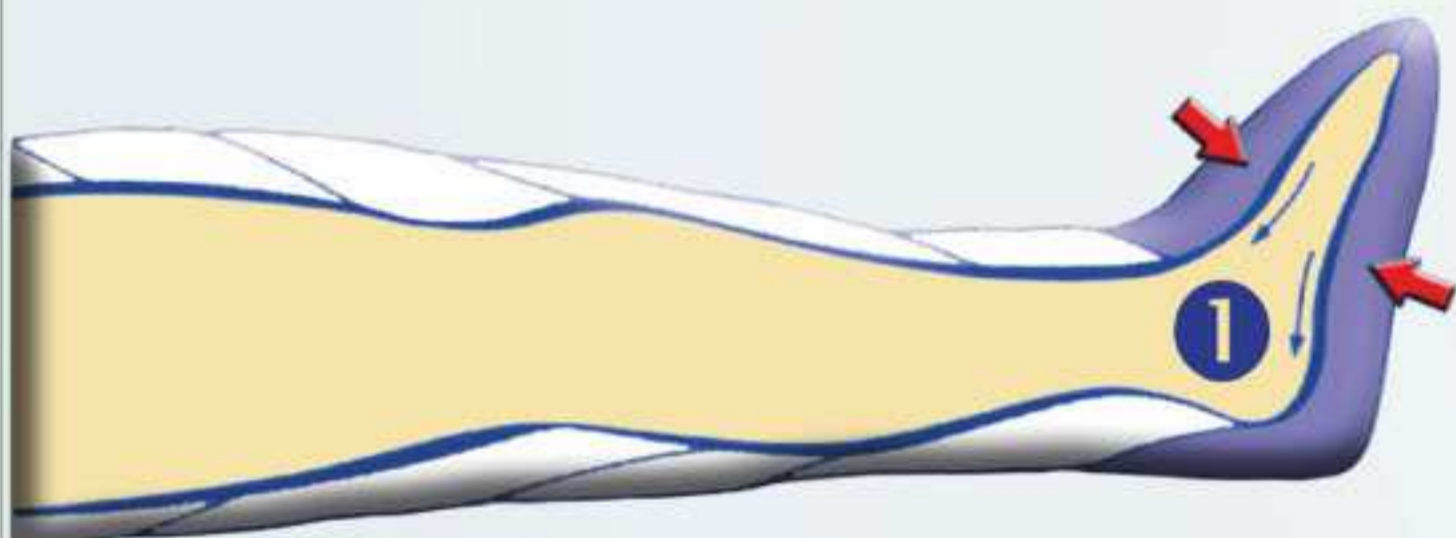


Gonflage chambre ① (distal) à 100% de la pression souhaitée.
Zones blanches = absence de pression

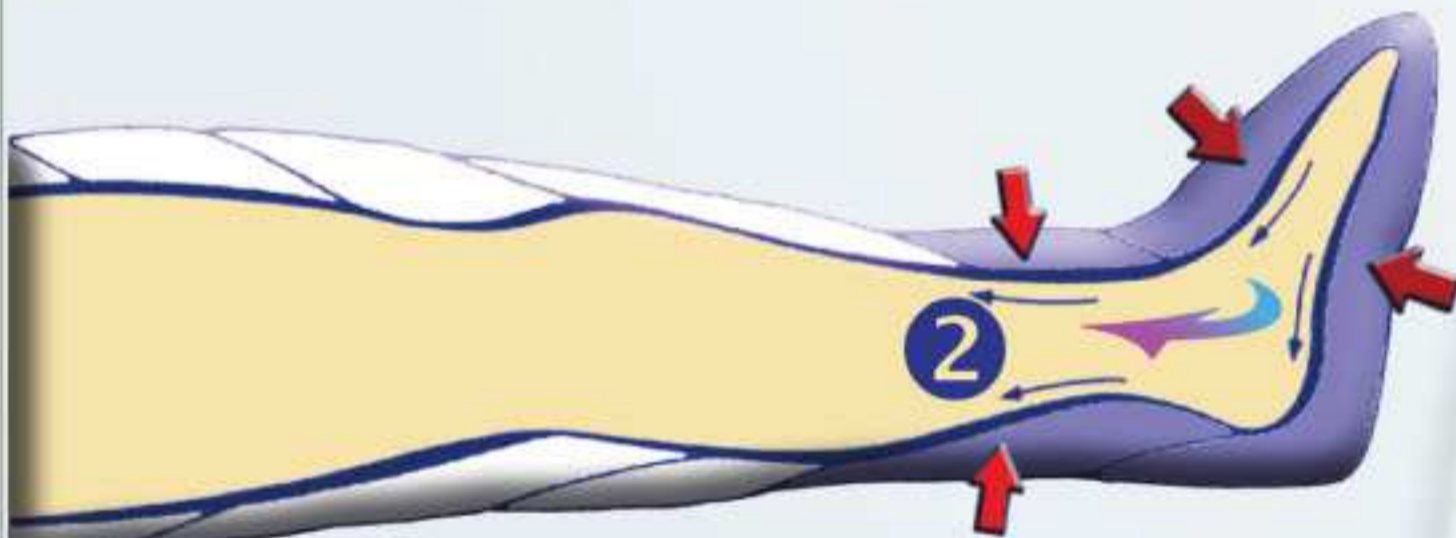


Gonflage chambre ② à 100% de la pression souhaitée + supplément de pression ch. 1
Différence de pression = sens de circulation des flux

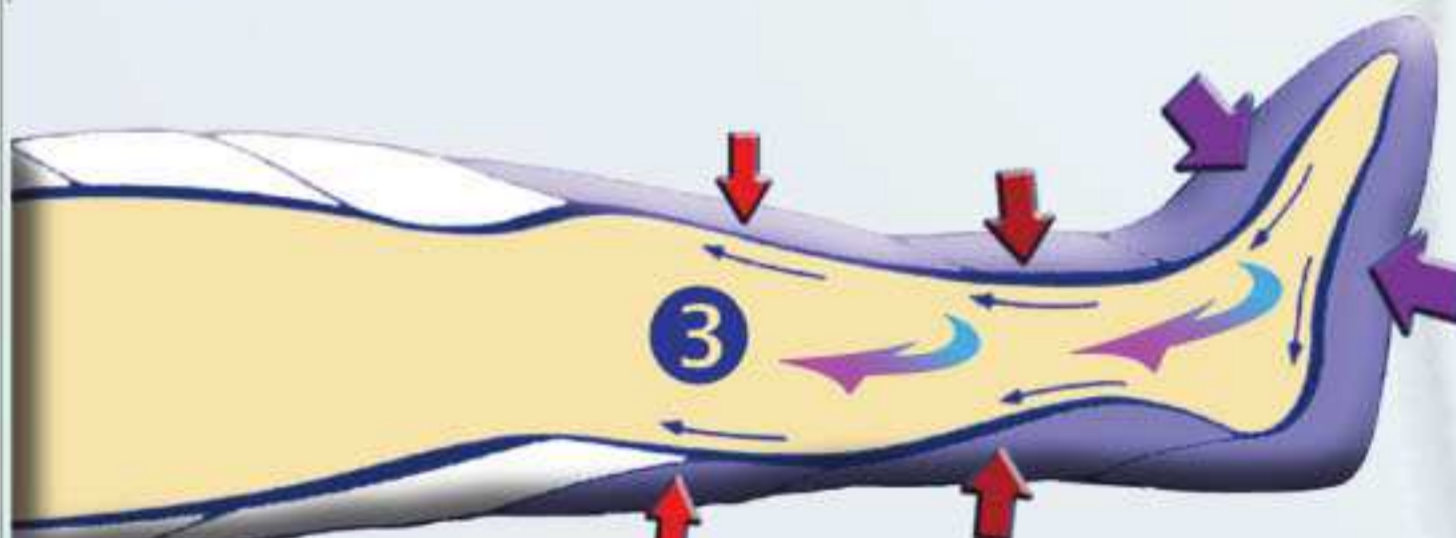

Gonflage chambre ③ à 100% de la pression souhaitée.
Pression chambre 3 < P ch. 2 < P ch. 1

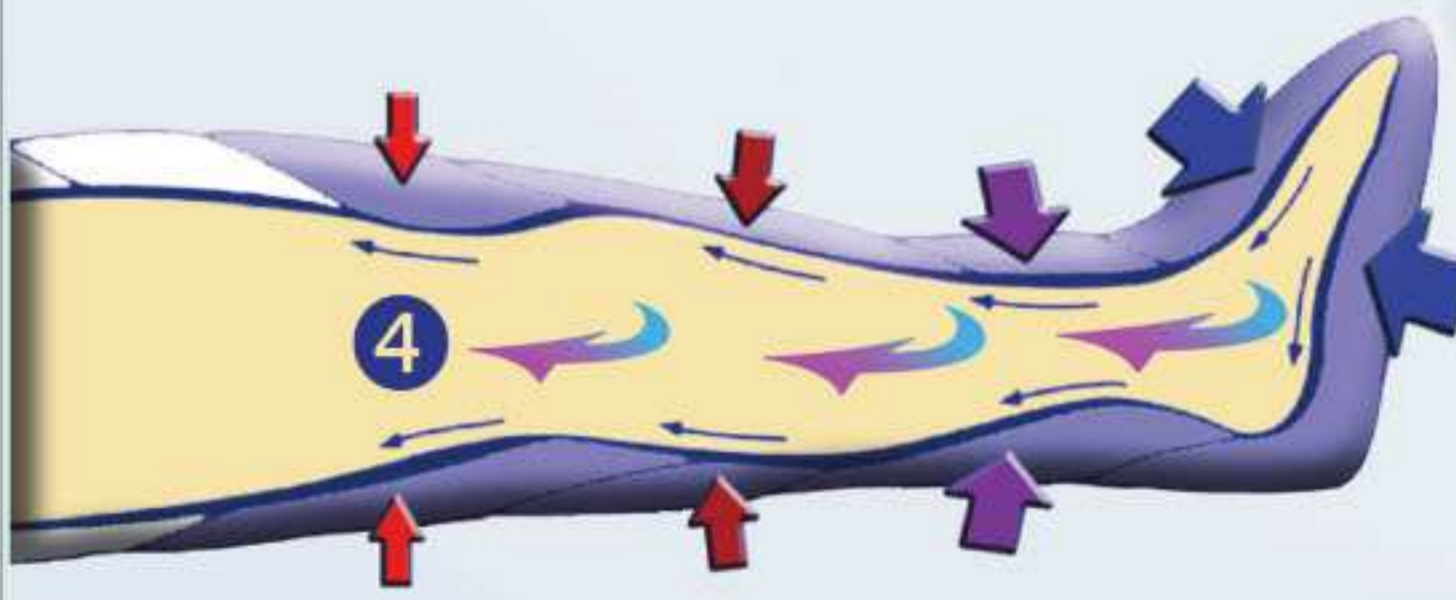

Gonflage chambre ④ à 100% de la pression souhaitée.
Pression chambre 4 < P ch. 3 < P ch. 2 < P ch. 1

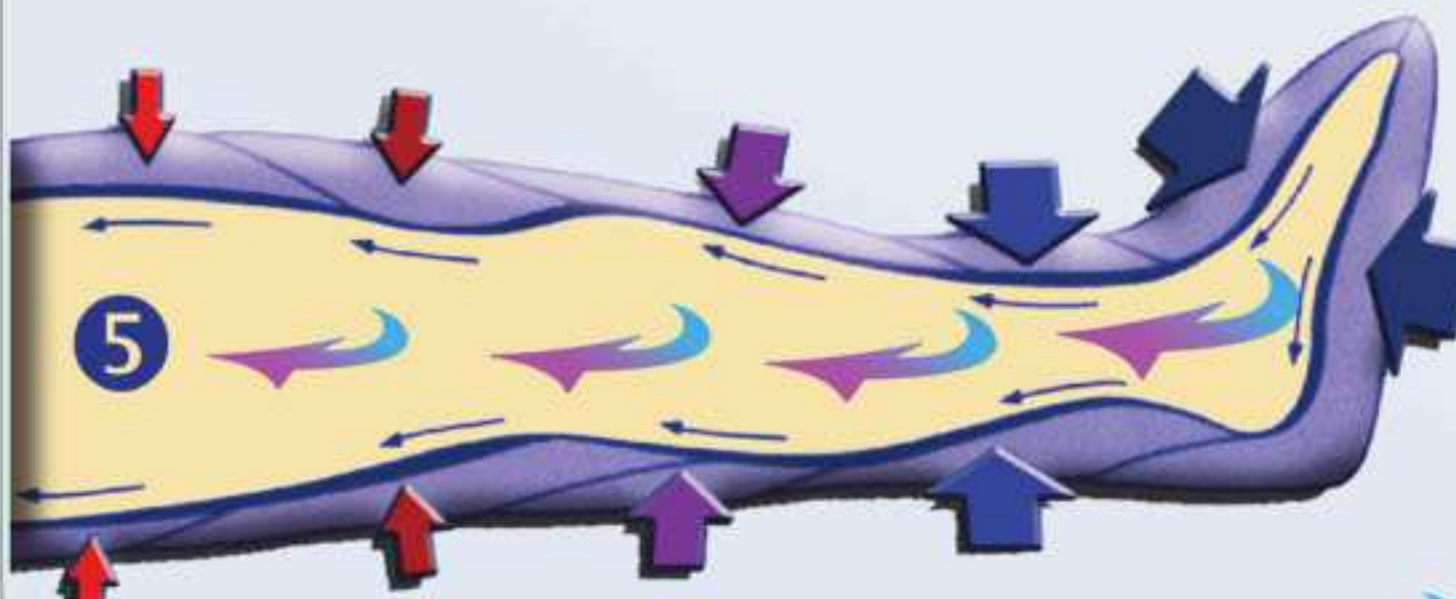

Gonflage chambre ⑤ à 100% de la pression souhaitée.
Fin de cycle de gonflage (Ex : accessoires 5 chambres)
Pression ch. 5 < P ch. 4 < P ch. 3 < P ch. 2 < P ch. 1
Pression finale chambre 5 = pression initiale chambre 1

■ % de la pression programmée

↻ Réactivation d'un flux veinolymphatique sain (disto-proximal)

