

GANTS NON STÉRILES EN NITRILE

Protection
et sécurité
d'utilisation

Thermofina
LA PRECISION

Présentation générale

Description

Ce gant d'examen est ambidextre, non stérile, non poudré, et est composé de nitrile (polymère synthétique) et d'additifs chimiques. Sa surface est micro-rugueuse et sa couleur est bleue indigo, noire ou blanc perle selon les références. La manchette à bord roulé se présente avec une longueur normale de 240 mm ou extra-longue de 290 mm minimum.

Classification

Les gants d'examen en nitrile non stériles et non réutilisables sont destinés à l'usage médical pour la protection du patient et de l'utilisateur de toute contamination croisée. Ils sont à considérer comme des « dispositifs médicaux non invasifs ou invasifs à usage temporaire ou à court terme » au sens de la directive européenne concernée, et font partie à ce titre de la Classe I.



Exatrile® non poudré

Gant d'examen en nitrile, non stérile, non poudré, ambidextre, manchette normale 240 mm minimum

Codes informatiques

XS : 445503XP
S : 445503
M : 445504
L : 445505
XL : 445505XG

Conditionnement

Boîte de 100 pièces,
Carton de 10 boîtes



Exatrile Long® non poudré

Gant d'examen en nitrile, non stérile, non poudré, ambidextre, manchette extra-longue 290 mm minimum

Codes informatiques

S : 445509
M : 445510
L : 445511
(XS et XL sur demande)

Conditionnement

Boîte de 50 pièces,
Carton de 20 boîtes



Exatrile Noir® non poudré

Gant d'examen en nitrile noir, non stérile, non poudré, ambidextre, manchette normale 240 mm minimum

Codes informatiques

XS : 445506XP
S : 445506
M : 445507
L : 445508
XL : 445508XG

Conditionnement

Boîte de 100 pièces,
Carton de 10 boîtes



Exatrile Light® non poudré

Gant d'examen en nitrile blanc, non stérile, non poudré, ambidextre, manchette normale 240 mm minimum

Codes informatiques

XS : 445512XP
S : 445512
M : 445513
L : 445514
XL : 445514XG

Conditionnement

Boîte de 100 pièces,
Carton de 10 boîtes

Codes couleurs des différentes tailles de gants



= Extra-Petit



= Petit



= Moyen



= Grand



= Extra-Grand

Support Dracula

Support universel de boîtes
(fixation murale par vis
ou adhésif double-face)

> Carton de 50 unités

> Code informatique : 090002




Composition (matériaux et agents chimiques)

Formulation des gants Exatrile®

Nitrile (Synthetic Latex Properties), Sulphur (Sulphur), ZnO (Zinc Oxide), TiO₂ (Titanium Dioxide), ZDEC (Zinc Diethyldithiocarbamate Accelerator), Pigment (Corn Flower Blue ou Black Pigment ou sans pigment coloré).

N.B. - Ne contient pas de latex, pas de phtalates, pas de dérivés d'origine animale, ni de thiurum.

Procédé de fabrication (résumé)

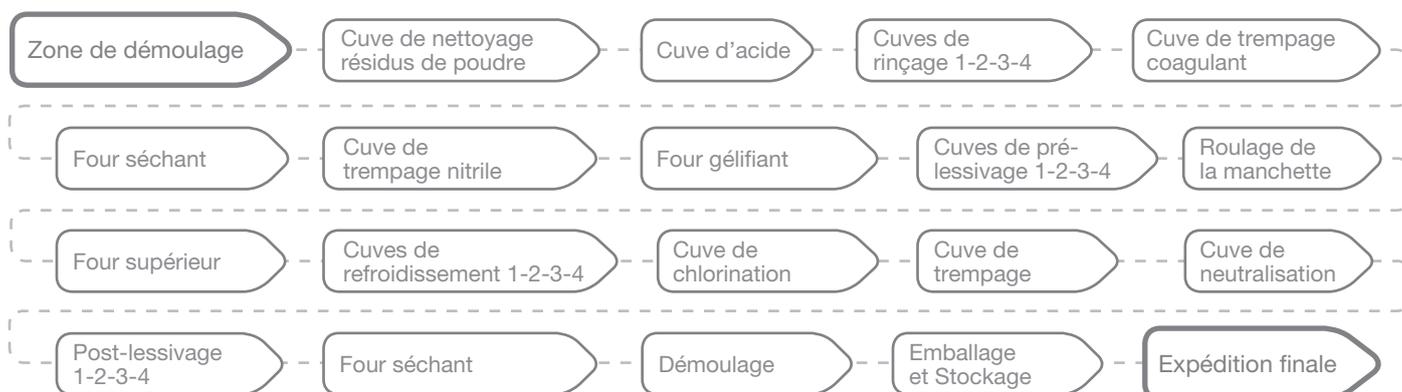

N.B. - Inspections et prélèvements à toutes les étapes selon procédures du système qualité.

Spécifications techniques

Critères	Normes	Résultats Exatrile®, Exatrile Long®, Exatrile Noir®, Exatrile Light®
DÉTECTION DES TROUS (essais et niveau de contrôle)	EN 455-1	AQL 1.5 (Assurance Quality Level)
DIMENSIONS longueur largeur	EN 455-2	≥ 240 mm (et 295 ± 5 mm en long) Extra-Petit : 75 ± 5 mm - Petit : 80 ± 10 mm - Moyen : 95 ± 10 mm -Grand : 110 ± 10 mm - Extra-Grand : ≥ 110
FORCE À LA RUPTURE avant vieillissement après vieillissement (70 ± 2°C pendant 7 jours)	EN 455-2	6 N au minimum 6 N au minimum
DURÉE DE CONSERVATION	EN 455-4	3 ans (recommandé)
PROTECTION CONTRE LES PRODUITS CHIMIQUES ET LES MICRO-ORGANISMES Terminologie et exigences de performance pour les risques chimiques Détermination de la résistance à la pénétration Perméation par des produits chimiques liquides potentiellement dangereux dans des conditions de contact continu Détermination de la résistance à la dégradation par des produits chimiques Terminologie et exigences de performance pour les risques contre les micro-organismes	EN 374-1/A1 EN 374-2 EN 16523-1 EN 374-4 EN 374-5	Conforme aux exigences et tests Conforme aux exigences et tests Conforme aux exigences et tests Conforme aux exigences et tests Conforme aux exigences et tests
ÉPAISSEUR (simple) manchette paume doigt	ASTM D6319	0,08 ± 0,03 mm (0,11 ± 0,03 mm en long) 0,11 ± 0,03 mm (0,14 ± 0,03 mm en long) 0,13 ± 0,03 mm (0,16 ± 0,03 mm en long)
ÉLONGATION ULTIME avant vieillissement après vieillissement (70 ± 2°C pendant 7 jours)	ASTM D6319	500% au minimum 400% au minimum
POUDRE RÉSIDUELLE	ASTM D6124 ASTM D6319	≤ 2 mg/gant
POIDS MOYEN DU GANT	PAS DE NORME	3 g ± 0,2 en light (taille M) 3,8 g ± 0,2 en manchette normale (taille M) 6,3 g ± 0,2 en manchette longue (taille M)
LIEU DE FABRICATION		Malaisie

N.B. - Rapports d'essais et certificats qualité sur demande.

CONDITIONNEMENT ET MARQUAGES

Palette

- Palette Europe complète de 60 cartons soit 600 boîtes soit 60 000 gants (*30 cartons soit 30 000 gants en LONG*)
- Panachage possible de taille et/ou matière par multiple de 10 cartons par étage (*6 cartons par étage en LONG*)
- Dimensions au sol 0,80 x 1,20 m
- Poids moyen 310 kg (*270 kg en LONG et 260 kg en LIGHT*)
- Chargement soigné, filmé, étiqueté et cerclé d'une bande de garantie
- Palette Europe consignée

Carton

- Carton de 10 boîtes soit 1000 gants
36 L x 25 H x 25 l environ en NORMAL
et 29 L x 26 H x 26 l environ en LIGHT
(*20 boîtes de 50 gants en LONG*
31 L x 45 H x 28 l environ)
- Identification des tailles et des matières par codes couleurs, lettres et chiffres
- Traçabilité par numéro de lot et date de péremption
- Poids moyen 4,8 kg (*8,4 kg en LONG et 4 kg en LIGHT*)
- Matériau recyclable
- Personnalisation possible sur demande

Boîte

- Boîte de 100 gants (*50 gants en LONG*)
- Identification des tailles par codes couleurs, lettres et chiffres
- Traçabilité par numéro de lot et date de péremption
- Poids moyen 480 g (*420 g en LONG et 400 g en LIGHT*)
- Symboles réglementaires selon normes en vigueur
- Fourniture de supports de boîtes adaptés sur demande
- Personnalisation possible sur demande



Lire les informations



Résistance chimique



Résistance aux micro-organismes



Niveau de qualité acceptable (Assurance Quality Level)



Certifié contact agro-alimentaire



Ne pas réutiliser Usage unique



Non stérile



Ne contient pas de latex



Stocker à l'abri du soleil et des U.V.



Stocker à l'abri de l'humidité



Emballage recyclable



THERMOFINA

Z.A.C. CHAMLYS - B.P. 130
77194 DAMMARRIE-LES-LYS
FRANCE

T : 33 (0) 1 64 37 81 96

F : 33 (0) 1 64 37 08 77

www.thermofina.fr

Instructions d'utilisation et de stockage